



Série 321LT

Balances d'analyse

Balances de précision



Un opérateur éclairé dans son travail tant dans le laboratoire que l'industrie n'accepte aucun compromis sur la qualité de son instrument. Et c'est précisément la raison pour laquelle PRECISA fait office de référence à travers le monde. PRECISA est un exemple de la perfection et de la précision Suisse. Nous vous prouvons depuis des décennies dans plus de 100 pays la rigueur de nos exigences qualité en matière de fabrication. PRECISA investit continuellement dans le développement de nouvelles technologies avec une équipe de spécialistes hautement qualifiés.

Utilisation universelle :

Les balances de la série 321LT sont très précises dans le temps grâce à la technologie PRECISA éprouvée. Elles répondent aux standards internationaux, en les dépassant même. Les menus sont intuitifs et simples à programmer. La série 321LT répond à vos besoins par une large gamme d'applications.



Affichage fluorescent :

Grâce au clavier 10 touches, la gamme série 321LT garantit une excellente ergonomie. Les touches "pré-programmées" rendent des applications telles que le "comptage" et les "statistiques" particulièrement simples.



Grande longévité :

La cellule à compensation électromagnétique développée par PRECISA est très précise et ce durablement. Cette cellule est assemblée à la main et assure des niveaux d'exigences qu'un processus automatisé ne permettrait pas. De plus, elle est entièrement réparable par un technicien qualifié. Tous ces éléments vous garantissent un retour sur investissement.



Interface BUS :

Différents accessoires peuvent être connectés et utilisés via l'interface BUS de la balance :

- Colonne lumineuse
- Lecteur code à barres
- Afficheur secondaire
- SmartBox® pour le contrôle de préemballés ou comptage
- Module Entrées/Sorties
- Interfaces supplémentaires
- Sorties analogiques



IP65 :

La protection IP65 assure une protection contre la poussière et les projections d'eau. Nous pouvons délivrer toutes nos balances (exceptés les modèles analytiques) avec cette option.



SCS système de calibrage automatique de série :

Le système de calibrage interne permet d'ajuster automatiquement l'instrument. Cette fonction se déclenche de trois manières différentes : à la demande de l'opérateur, quand la balance détecte un écart de température ou à une heure programmée. Cette fonction vous sera très utile en bonne pratique de laboratoire.



Precisa Série 321LT : Spécifications techniques



Analytique							
Modèle	Portée	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau (mm)	Classe/"e"	Temps réponse (s)
LT120A	120g	0.1mg	0.1mg	0.2mg	Ø 90	I / 1mg	2
LT220A	220g		0.1mg				3
LT320A	320g		0.15mg				

Dimensions (Largeur x Longueur x Hauteur) 228x381x335mm
Dimensions intérieures de la cage de verre 172x198x223mm

Poids net 6.6kg
Plage de température homologuée Classe I (15...25°C)



Milligramme								
Modèle	Portée	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau (mm)	Classe/"e"	Temps réponse (s)	
LT320M	320g	1mg	1mg	1.5mg	135x135	II / 10mg	1.5	
LT620M	620g			2mg		I / 10mg	2	
LT920M	920g							
LT1220M	1220g							

Dimensions avec pare-brise 228x381x124mm

Poids net 5.5kg
Plage de température homologuée Classe I (15...25°C)
Plage de température homologuée Classe II (10...30°C)



Centième							
Modèle	Portée	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau (mm)	Classe/"e"	Temps réponse (s)
LT320C	320g	0.01g	0.005g	0.01g	200x200	II / 0.01g	1.5
LT620C	620g						
LT1200C	1200g						
LT2200C	2200g						
LT3200C	3200g						
LT4200C	4200g						
LT6200C	6200g						
Dimensions 228x381x90mm					Poids net 5.6kg		
Pas de pare-brise ni cage					Plaque de température homologuée Classe II (10...30°C)		



Dixième et Gramme							
Modèle	Portée	Précision	Répétabilité	Linéarité	Plateau (mm)	Classe/"e"	Temps réponse (s)
LT3200D	3200g	0.1g	0.05g	0.1g	200x200	II / 0.1g	1
LT6200D	6200g		0.1g	0.15g		II / 1g	2
LT10200D	10200g		0.5g	1g			
LT10200G	10200g	1g					

Dimensions 228x381x90mm
Pas de pare-brise ni cage

Poids net 5.6kg
Plage de température homologuée Classe II (10...30°C)


Spécificités communes					
Affichage flottant	Plage de température	Tension	Stabilité de réglage	Puissance	Fréquence
Ajustable	5...40°C	115V – 230V	Ajustable	18VA	50/60HZ

APPLICATIONS

	Comptage de pièces		Totalisation		Test de répétabilité
	Conversion d'unités		Mesure de densité		Contrôle +/-
	Pesée en pourcentage		Pesée d'animaux		Statistiques
	Calculateur		Pesée dynamique		

EQUIPEMENTS

	LED Bleu		Sortie RS232		Protection antivol et des menus avec mot de passe
	Calibrage interne automatique		USB Device		Horloge avec date et heure
	Calibrage externe avec reconnaissance du poids (ICM)		Pesée sous socle		Ethernet (en option)
	WiFi (en option)		Bluetooth (en option)		HID (en option)

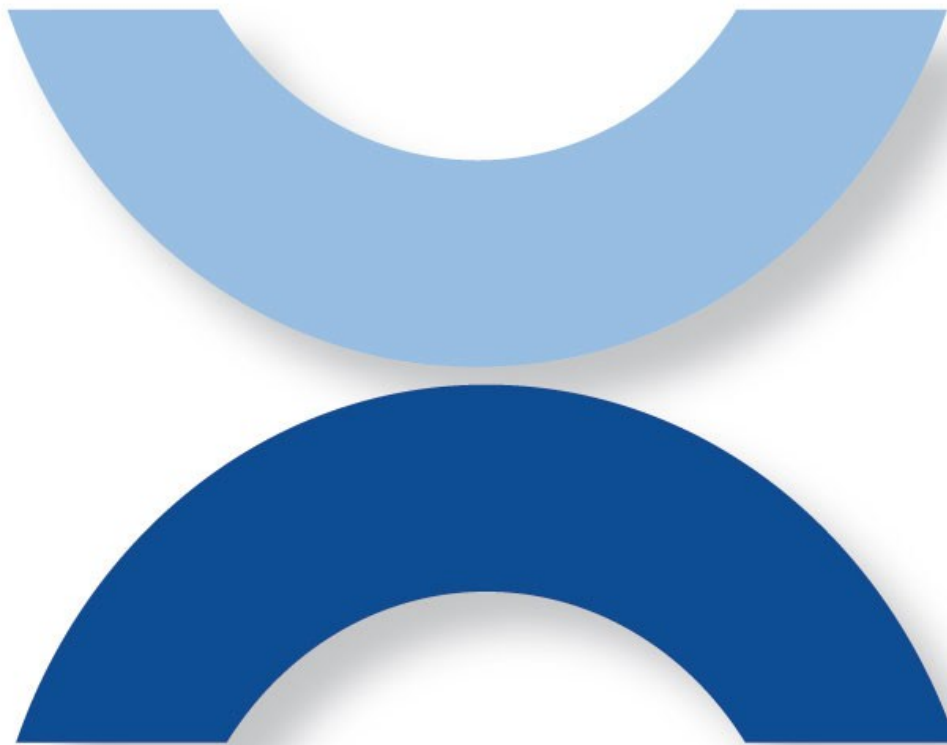

PRECISA France SA
15, rue C.E. Jeanneret
TECHNOPARC
78300 Poissy, France
Tel. +33 1 39 11 55 75
Fax. +33 1 39 11 40 75
Email : info@precisa.fr
www.precisa.fr